

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

新しくなった節水バケツは、持ち上げるとロック!
「より安心して処理できる」
バケツになりました




1 運びやすい

POINT
1

バケツの柄がロック!

柄を持ち上げただけでロックするので、
トイレまでの運搬が安定します。

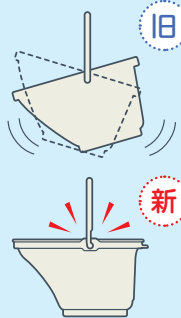

ロック機能で傾きやすかった
バケツ本体が固定され
傾きにくくなりました。

NEW


POINT
2

段差にぶつかりにくい

バケツ底部からバケツ柄までの高さが
低いので、階段を昇り降りする時に
段差にぶつかりにくくなっています。

一般的なポータブル
トイレ用バケツ

「安寿」のバケツ

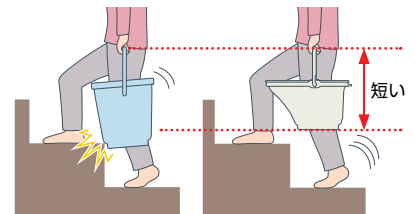

2 後処理しやすい

POINT
1

洗やすい

バケツ底部をまるくしたので、
ブラシ等で洗いやすくなりました。

洗しやすい
丸い底部!




POINT
2

水が流しやすい

ロックしたバケツ柄と持ち手の両方で
バケツ本体を支えられるので、
水が出る勢いを調整しやすくなりました。



手をそえやすい
持ち手形状

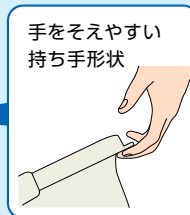


NEW

POINT
3


水切れが良い

突起なし

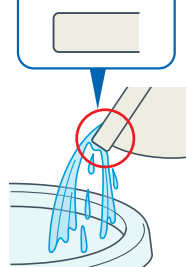

水がバケツをつたって
垂れてしまいます。

突起あり

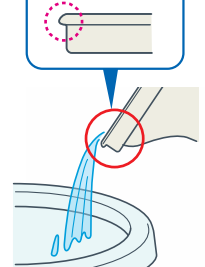


安寿伝統の突起で
水が垂れません。

そのほか、充実した節水バケツの機能はそのまま


軽い

従来から好評の節水構造（1ℓ）なので、
軽い力で持ち運びできます。
大便は深いところにおさまります。

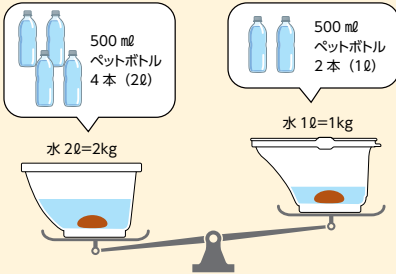


音が静か

一般的なバケツ

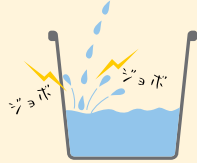

一般的なバケツでは
尿が直接水面に
当たるので跳ね返り
音がします。

「安寿」のバケツ

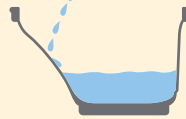

尿が落ちる位置に
傾斜があるので
跳ね返り音がせず、
静かに排尿できます。

「すっきりポイ」にも対応

バケツに袋をかぶせて汚物処理の手間を
少なくする「すっきりポイ」も使用可能です。
「すっきりポイ」は感染症対策としてご好評
いただいています。

すっきりポイ



バケツに
取り付ける、
排泄物の
処理袋です

■ 節水型ポータブルトイレ用バケツ対応機種

下記のポータブルトイレに標準装備されています。

	家具調トイレ							樹脂製トイレ	
	セレクトR					トワレットチェア	折りたたみ家具調トイレ	ジャスピタ	
	ノーマル	ノーマルワイド	はねあげ	はねあげワイド	コンパクト	—	—	ブラウン	ベージュ
	商品コード								
標準便座	533-850	533-856	533-865	533-871	533-880	533-062	533-832	533-900	533-920
ソフト便座	533-851	533-857	533-866	533-872	533-881	—	533-833	533-901	533-921
暖房便座	533-852	533-858	533-867	533-873	533-882	—	—	533-902	533-922
標準・快適脱臭	533-853	533-859	533-868	533-874	533-883	—	—	533-903	533-923
ソフト・快適脱臭	533-854	533-860	533-869	533-875	533-884	—	—	533-904	533-924
暖房・快適脱臭	533-855	533-861	233-870	533-876	533-885	—	—	533-905	533-925

■ 部品販売の場合

製品名	商品コード	メーカー希望小売価格	
節水型ポータブルトイレ用バケツ	591-941	2,500円 (税込 2,750円)	

※仕様変更のため、商品コードは継続となります。



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475
大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7101
名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)796-8040
福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく)

- お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
- 個人情報には適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

■お問い合わせは…