

安 あんじゅ 寿

楽しく開閉 シャワーベンチ S/U/Sフィット

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

押して開く。引いてたたむ。

いつでも、楽しくワンアクション



握らず
押すだけ!


握らず
引くだけ!



楽 ら おり お シリーズ

ARONKASEI CO., LTD.

楽しく開閉シャワーベンチが 一人入浴のたのしみをサポートします。

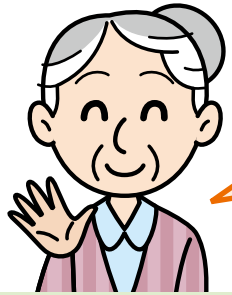


軽い力で

押すだけ

開く

楽しく
アシストキャスター

前脚に「楽しくアシストキャスター」を搭載。開く動きをアシストします。

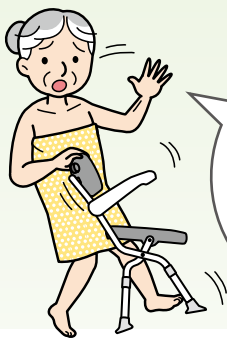

ベンチを開く
動作が不安定で、
転びそうになり
不安でした…。



背もたれを押すだけで
椅子の状態になりました。
これなら一人で
入浴できそう！

楽しくアシスト背もたれ

背もたれ上面のレバー部を軽い力で押すだけでいすの状態にできます。



狭い浴室でもイスの状態にできる


壁際にベンチを置いて
いる場合でもベンチを
傾ける必要がなく、ベンチを
開くことができます。



座面高さが48cmまで調節可能

業界
最高クラス
48cm

48cm
S
36cm
※7段階
(2cmピッチ)

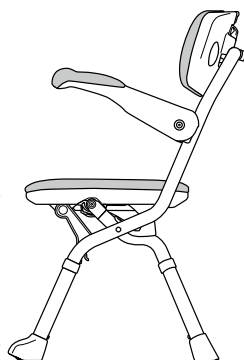

立ち座りのとき、
膝を曲げると
痛い…。



座面が高いから、
立ち座りが
楽になりました。



楽しく開閉
シャワーベンチで
お風呂が楽しみに
なりました。

楽しくアシストレバーを

引き上げるだけ

閉じる

前かがみにならずに
折りたためる、
腰・膝に配慮した
折りたたみ設計

握力いらずの楽しくアシストレバー

引き上げるだけで折りたためるので、握力の弱い方、関節疾患の方でも楽に操作できます。



狭い浴室でも折りたためる

壁際にベンチを置いている場合でも無理なくレバーを操作できます。



折りたたんだあとは
前からでも後ろからでも持ち運びに
便利な持ち手で持ち運べます。

座面側

背もたれ側



開閉ロック時



折りたたむとき、
レバーを握る
指が痛くて…。



指を曲げずに
引き上げるだけで
折りたためられて、
指が痛くありません。

背もたれ
角度調節が
可能

背もたれのソフトパッドを上下反転して装着するだけで簡単に背もたれ角度を調節できます。

立ち上がりやすい
姿勢保持タイプ



垂直に近い背もたれ形状で重心を移動させやすいため、立ち上がりやすくなります。

座位移乗や足を洗うときに足を
上げやすい背もたれ後傾タイプ



座位移乗時に背中を後方に傾けられるため足上げが行いやすくなります。

お手入れしやすいソフトパッド

座面ソフトパッドの水抜き穴を1か所だけにしたことで
お手入れの手間を軽減できます。


防カビ加工 &
クリーン構造

防カビW
ソフト

SIAA
防カビ加工



ソフトパッドと座面の
間に水が溜まりにくい
構造です。

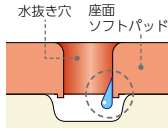

コンパクトに折りたたみ

折りたたみ幅わずか16cm(開閉ロック時)。
介助スペースの確保や収納時に便利です。
また、開閉ロック時は、不意にベンチが開か
ない安心構造。

業界
最薄クラス

16cm



(商品寸法図)

S



U




Sフィット



単位:cm

(折りたたみ時)
S/U/Sフィット共通

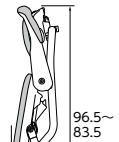

16(開閉ロック時)
22(開閉ロック解除時)

楽しく開閉シャワーベンチ S/U/Sフィット

楽おしシリーズ

座面タイプ	カラー	商品コード	商品サイズ	商品重量	材質	梱包入数	JAN	TAIS	価格
S	レッド	536-080	幅51×奥行48~53×高さ71~83cm (座面までの高さ:36~48cm) (折りたたみ時:幅51×奥行16× 高さ83.5~96.5cm)	5.2kg	(座面・背もたれ)ポリエチレン (グリップ)エラストマー ^{※1} (ひじ掛け)ポリプロピレン (脚ゴム)合成ゴム ^{※1} (ソフトパッド)EVA樹脂 ^{※1} (パイプ)アルミニウム ^{※1} 防カビ加工	2	012604	000558	28,000円 (税抜)
	ブルー	536-081					012611		
	グリーン	536-082					012628		
U	レッド	536-085	幅51×奥行48~53×高さ71~83cm (座面までの高さ:36~48cm) (折りたたみ時:幅51×奥行16× 高さ83.5~96.5cm)	5.2kg	(座面・背もたれ)ポリエチレン (グリップ)エラストマー ^{※1} (ひじ掛け)ポリプロピレン (脚ゴム)合成ゴム ^{※1} (ソフトパッド)EVA樹脂 ^{※1} (パイプ)アルミニウム ^{※1} 防カビ加工	2	012635	000558	28,000円 (税抜)
	ブルー	536-086					012642		
	グリーン	536-087					012659		
Sフィット	レッド	536-090	幅46×奥行48~53×高さ71~83cm (座面までの高さ:36~48cm) (折りたたみ時:幅46×奥行16× 高さ83.5~96.5cm)	4.8kg	(座面・背もたれ)ポリエチレン (グリップ)エラストマー ^{※1} (ひじ掛け)ポリプロピレン (脚ゴム)合成ゴム ^{※1} (ソフトパッド)EVA樹脂 ^{※1} (パイプ)アルミニウム ^{※1} 防カビ加工	2	012666	000559	28,000円 (税抜)
	ブルー	536-091					012680		
	グリーン	536-092					012710		

JANコードの国名およびメーカーコードを表わす49-70210は共通です。
TAISコードのメーカーコードを表わす00221は共通です。

組立完成品

最大使用者体重 100kg

特定福祉用具/特定介護予防福祉用具

TOAGOSEI グループ

Aron アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475
大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100
名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)709-6011
福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

●記載価格はメーカー希望小売価格です。
●商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
●製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月~金 9:00~17:00(12:00~13:00はのぞく)

■お問い合わせは…