

しんわ通信 5月号



5月14日(日) 母の日



プレゼントにもおすすめの杖について、
種類・選び方のご案内です。



折りたたみ杖

常に杖が必要なわけではない方に

- ◎ 折りたたんでバッグなどに携帯しておける
- ◎ 旅行で長時間の歩行が心配な方
- ◎ 疲れた時などの常備用杖
- ◎ 歩行に少し不安がある方



希望小売価格 **4,070** 円～ 販売価格 **担当営業へ** 円～

伸縮杖

初めての杖にもオススメ

- ◎ 長さ調節が可能
- ◎ アルミ製やカーボン製の商品がある
- ◎ さまざまな柄の中から選べる
- ◎ 自分の好みに合わせやすい



希望小売価格 **2,750** 円～ 販売価格 **担当営業へ** 円～

多点杖

日常歩行で転倒が心配な方に

レンタルあります

- ◎ 杖先が4本や3本などに分かれている
- ◎ 安定性に優れている
- ◎ 坂道やでこぼこ道では安定しない
- ◎ 杖の持ち手の左右切替に対応したものもある



ロフトストランド杖

歩く際のサポート力も高い

レンタルあります

- ◎ 安定性が高く体重を支える機能も優れている
- ◎ 握力や腕力が弱い方に
- ◎ 片マヒがある方に
- ◎ 手首に力が入りにくい方に




松葉杖

足への負担が少ない

レンタルあります

- ◎ 脇あてとグリップが付いている
- ◎ 歩行の際、身体の左右バランスを補正
- ◎ 骨折や捻挫をしている方に
- ◎ 下半身麻痺や股関節症などの方に

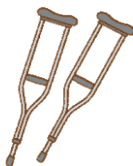

サイドウォーカー

立上り時の手すりとしても使用

レンタルあります

- ◎ 安定性に優れている
- ◎ 握力や腕力が弱い方に
- ◎ 片マヒがある方に
- ◎ 坂道やでこぼこ道では安定しない



杖の長さ調節



ステッキの適切な長さの目安は
(身長÷2)+3cm

例えば

使われる方の身長が154cmの場合、
(154÷2)+3cmで80cmとなります。



ご注意
ステッキは、長すぎたり短すぎたりすると、腰痛になったり、姿勢が悪くなったり転びやすくなったりします。

一般的なステッキの正しい握り方



ステッキは身体の一部です!!

重心が支柱の真上にくるように持って下さい。

ステッキの適切な長さ早見表

身長	ステッキの長さ	身長	ステッキの長さ
140	73	160	83
142	74	162	84
144	75	164	85
146	76	166	86
148	77	168	87
150	78	170	88
152	79	172	89
154	80	174	90
156	81	176	91
158	82	178	92

※あらかたの目安ですので、手に持ってご確認ください。(単位:cm)



福岡・福岡西営業所 ✧ 福岡東営業所 ✧ 大村営業所
Instagram 更新中!



福岡・福岡西営業所

Follow Me!



Instagram

新和メディカル 福岡西営業所

福祉用具の紹介や、社内の雰囲気など様々な情報を発信いたします!

shinwamedical_fukuokanishi

shinwamedical_fukuoka nishi

フォロー中 ▼ メッセージを送信

投稿52件 フォロワー136人 フォロワー中118人

新和メディカル福岡西営業所 福岡営業所
8月1日 新和メディカル福岡西営業所が開設されました。主に福岡市西区、早良区、糸島市が業務エリアとなります。今後とも宜しくお願い致します。
shinwamedical.com
フォロワーshinwamd_higashi



福岡東営業所

Follow Me!



Instagram

新和メディカル 福岡東営業所

福祉用具の紹介や、社内の雰囲気など様々な情報を発信いたします!

shinwamd_higashi

shinwamd_higashi

フォロー中 ▼ メッセージを送信

投稿1件 フォロワー4人 フォロワー中5人

新和メディカル福岡東営業所
新和メディカル福岡東営業所
2月1日に開設致しました。福岡市東区、糟粕郡、古賀市、宗像市が主な業務エリアとなります。経歴豊富な営業が迅速に対応致します。宜しくお願い致します。



大村営業所

Follow Me!



Instagram

新和メディカル 大村営業所

福祉用具の紹介や、社内の雰囲気など様々な情報を発信いたします!

shinwa_omura

shinwa_omura

プロフィールを編集

投稿42件 フォロワー112人 フォロワー中2人

(株)新和メディカル 大村営業所
長崎県大村市
営業時間 8:30~17:30
定休日 土・日曜(祝祭日)、祝祭日

よりよい介護環境をサポート
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
介護リフォーム(住宅改修)
新和メディカル
#福祉用具貸与 #特定福祉用具販売 #住宅改修 #介護保険 #大村市
shinwamedical.com




株式会社 新和メディカル

- 福岡営業所
- 北九州営業所
- 諫早営業所
- 福岡西営業所
- 武雄営業所
- 大村営業所
- 福岡東営業所
- 佐世保営業所
- 長崎営業所



当社HP

担当: