

エアマットレスは 全自動運転の時代へ

床ずれ防止用具

体位変換機能付き



全自動運転 + 体圧可視化
ロボティックマットレス

SCOPE

スコープ

床ずれ防止用具の主体はエアマットレスですが、課題は“操作が難しい”ことでした

次世代型のエアマットレス「スコープ」は
利用者様への最高のケアと介護者様の負担軽減を目的に開発された
「全自動運転」の床ずれ防止・エアマットレス（体位変換機能付き）です

スコープ

モルテン

PAT.P



詳細はコチラ



リモコン



全自動

リモコンの全自動ボタンを押すだけで、

- さまざまな身体状態の利用者様に適応
- 身体状態が悪化または回復に変化した場合も対応以上をマットレスが自動運転で対応します。

よって、「ボタン操作（マニュアル操作）は一切不要」です。
利用者様の状態が変化した際にも、リモコンの設定変更が不要なため、設定ミスも防げます。

臥床時の圧対策

- ① さまざまな身体状態の利用者様への適応
- ② 悪化時や回復時への適応

マットレスが身体状態の変化に対応し、自動で最適な圧対策を行います。利用者様の身体状況と変化からマットレスの選定・入れ替えて悩まれる必要はありません。

臥床時(スタート)


静止-体圧調整

30分間体動がなかったら




除圧-圧切替

30分間体動がなかったら

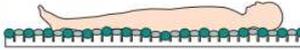


除圧-体位変換

除圧のための低角度の体位変換

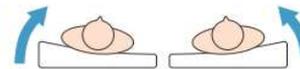

- ③ ベッド背上げ時の底着き対策・背抜き

センサーが背上げ角度を判定し、自動で臀部の底着きを対策します。自動で「背抜き」を行い圧による苦しさを緩和します。

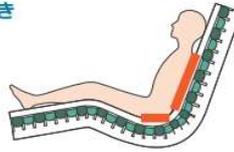

※ベッド背上げ時には体位変換は自動的に止まります

臀部周辺の圧の可視化

※スコープのみの機能です

見守り

パジャマのずれや厚手防水シーツのシワ、お尻の下の異物... 臀部周辺の圧の可視化は、体圧分布モニターで圧を示すことで見えない危険を察知し、適切な処置をするための見守り機能です。



+ポジショニングケアをもっと確実に

体圧分布モニターで圧の状態が確認できるため、確実な圧対策と利用者様の楽な寝姿勢のためのポジショニングケアが可能です。



スコープ 全自動運転 + 体圧可視化 ロボティックマットレス

非課税

タイプ	品番	TAISコード	サイズ	重量	月額レンタル料金	利用者様負担額 (1割)	利用者様負担額 (2割)	利用者様負担額 (3割)
91cm幅 レギュラー	MSCP91	00054-000648	長さ193×厚さ17cm	11.5kg	20,000 円	2,000 円	4,000 円	6,000 円
91cm幅 ショート	MSCP91S	00054-000650	長さ182×厚さ17cm	11.0kg				

金額は、各地域によって異なる場合があります。

スコープ ライト 全自動運転 高性能エアマットレス ※臀部周辺の圧の可視化機能がないモデル

非課税

タイプ	品番	TAISコード	サイズ	重量	月額レンタル料金	利用者様負担額 (1割)	利用者様負担額 (2割)	利用者様負担額 (3割)
91cm幅 レギュラー	MSCPL91	00054-000652	長さ193×厚さ17cm	11.0kg	11,000 円	1,100 円	2,200 円	3,300 円
91cm幅 ショート	MSCPL91S	00054-000654	長さ182×厚さ17cm	10.5kg				

GWお休みについて

GWの営業を上記のとおり変更させていただきます。宜しくお願い申し上げます。

4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	5月1日	5月2日	5月3日
一部営業	休み	休み	平常	平常	平常	休み
5月4日	5月5日	5月6日	5月7日	5月8日		
一部営業	休み	休み	平常	平常		

《何かご不明な点等ございましたら、下記にご連絡ください。》

(株)新和メディカル 福岡営業所 担当: 久野

〒811-1314 福岡市南区的場1-27-4

TEL:0000000 FAX:0000000